



MARQUE: OKOIA
REFERENCE: TONIC 4
CODIC: 4241673



NOTICE



Relax by KOÏA

TONIC 4

4 IN 1 POWER MASSAGER
APPAREIL DE MASSAGEUR 4 EN 1
4-IN-1 MASSAGEAPPARAAT



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ En ce qui concerne la méthode et la fréquence du nettoyage, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page FR11.
- ❖ Cet appareil comporte une surface chaude. Les personnes qui sont insensibles à la chaleur doivent être prudentes lorsqu'elles utilisent l'appareil.



MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil, et gardez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à celle des prises de votre domicile.
- N'utilisez pas l'appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.

- L'appareil ne doit pas être placé sur ou à proximité d'une cuisinière allumée (à gaz ou électrique), ni dans un four.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage, avant de monter ou démonter des pièces, et avant toute manipulation de nettoyage ou d'entretien. Avant de brancher ou débrancher l'appareil, assurez-vous que le bouton marche/arrêt est bien sur OFF.
- Ne portez pas l'appareil en le tenant par son câble, et n'utilisez pas le câble comme poignée.
- Le câble ne doit pas entrer en contact avec des surfaces brûlantes.
- L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé en plein air.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un endroit où des aérosols ou de l'oxygène sont utilisés.
- Ce masseur ne doit pas être utilisé sur un enfant ou sur un animal.
- N'essayez pas de repêcher l'appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé dans un bain ou une douche.
- Cet appareil ne doit pas être placé ou rangé dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou dans un lavabo.
- L'appareil ne doit pas tomber ou être mis dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez en aucun cas cet appareil pour masser à proximité du cœur chez une personne munie d'un pacemaker. Demandez l'avis d'un médecin avant d'utiliser l'appareil sur d'autres parties du corps chez une personne munie d'un pacemaker.
- N'utilisez en aucun cas l'appareil pour masser des zones enflées, brûlées, infectées ou abîmées du corps ou de la peau.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sur les plaies ouvertes, les capillaires sanguins, les varices, l'acné, la rosacée, l'herpès et toute autre maladie cutanée.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé pendant la grossesse.
- N'utilisez pas l'appareil sur le visage (notamment les yeux), sur le larynx ou sur toute autre partie sensible du corps.
- N'utilisez en aucun cas cet appareil en dormant.
- N'utilisez en aucun cas cet appareil après avoir pris des médicaments ou consommé de l'alcool (niveau de vigilance réduit).

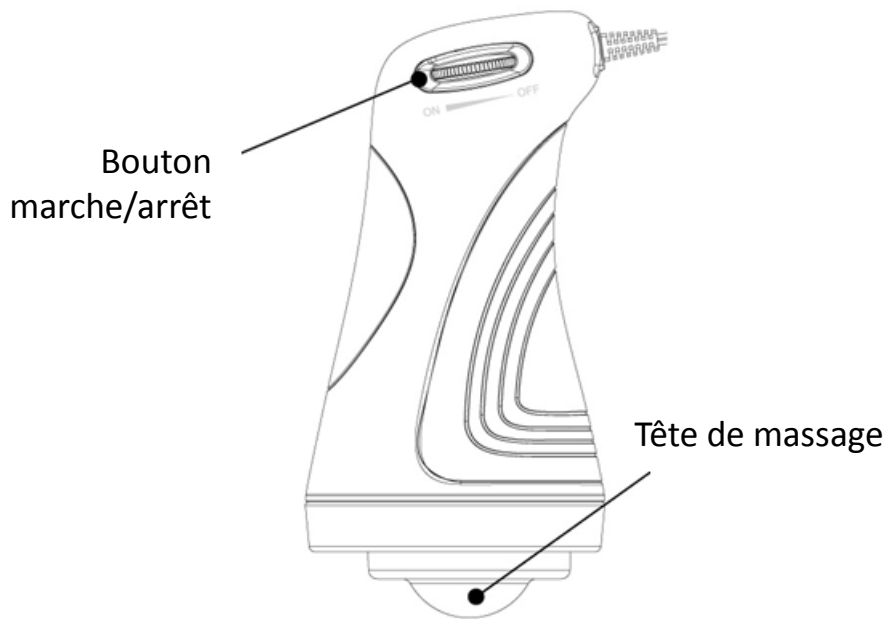
CECI N'EST PAS UN APPAREIL MÉDICAL; IL N'EST PAS CONÇU POUR DIAGNOSTIQUER, TRAITER, SOIGNER OU PRÉVENIR QUELQUE MALADIE QUE CE SOIT.

Consultez votre médecin avant d'utiliser le masseur si:






- Vous souffrez d'une maladie grave ou si vous êtes en convalescence après une opération sur la partie supérieure du corps.
- Vous portez un implant, un pacemaker ou tout autre appareil similaire.
- Vous souffrez de thrombose.
- Vous êtes diabétique.
- Vous avez des douleurs inhabituelles.

DESCRIPTION

Cet appareil vous permet de vous masser efficacement chez vous. Son utilisation régulière vous permettra d'améliorer l'apparence de votre cellulite ainsi que la circulation sanguine locale.



Types de têtes et fonctions

 Tête de massage à 1 boule	Pour masser la nuque et relaxer les muscles
 Tête de massage à 2 boules	Pour un massage intensif des tissus
 Tête de massage à 4 boules	Spécialement conçue pour améliorer la circulation sanguine
 Tête de massage Tai Chi	Spécialement conçue pour les massages avec action en profondeur
 Couvercle de protection	Évite que les poils ou les cheveux ne pénètrent dans l'appareil.

DURÉE RECOMMANDÉE POUR LE TRAITEMENT

- De manière générale, un massage doit durer de 10 à 20 minutes, quel que soit le muscle du corps. Le traitement est à effectuer 1 ou 2 fois par jour.
- De même que le métabolisme varie d'une personne à l'autre, les réactions au massage sont également différentes. Vous apprendrez rapidement à ajuster la

durée du massage selon vos besoins et votre confort personnel. En cas de doute concernant le traitement, nous vous conseillons de demander l'avis de votre médecin.

UTILISATION

Assurez-vous que le bouton de vitesse de l'appareil est sur OFF.

1. Branchez le masseur.
2. Montez la tête de massage souhaitée sur l'appareil. Montez le couvercle de protection sur la tête de massage.
 - Pour démonter la tête de massage, enlevez d'abord le couvercle de protection puis tirez sur la tête de massage.
 - Pour savoir quelle tête utiliser, reportez-vous aux instructions dans le tableau ci-dessus "Types de têtes et fonctions".
3. Pour allumer le masseur, mettez le bouton marche/arrêt sur ON.
4. Prenez le masseur et passez-le sur la peau (voir "Direction de massage").
 - Faites simplement glisser l'appareil sur la zone à traiter, en évitant d'appuyer trop fort.
5. Quand vous avez fini d'utiliser le masseur, éteignez-le en mettant le bouton marche/arrêt sur OFF puis débranchez-le.

DIRECTION DE MASSAGE

L'appareil se passe en glissant sur la peau.

Abdomen

Massez par mouvements circulaires délicats en allant du centre vers l'extérieur pour relaxer les abdominaux.



Retour

Massez la colonne vertébrale de haut en bas, puis par mouvements circulaires autour des omoplates et du centre vers l'extérieur.





Nuque

Massez en partant de l'épaule et en remontant jusqu'à l'oreille.

Jambes

Partez du mollet et remontez en mouvements circulaires, puis passez à la cuisse.

Fesses

Combinez les mouvements circulaires avec des mouvements de bas en haut. Vous pouvez par exemple passer l'appareil en montant, puis enchaîner avec un mouvement descendant ou circulaire.



Ne massez jamais sur les os (genoux, chevilles, coudes). Les parties saillantes de la tête de massage risqueraient de heurter et blesser l'os.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez le masseur et débranchez-le. Laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer.

Détachez le couvercle de protection et la tête de massage de l'appareil.

Essuyez les surfaces extérieures du masseur avec un chiffon légèrement mouillé. Ne la mettez jamais dans l'eau.

Nettoyez le couvercle de protection et les têtes de massage dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les et séchez-les bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.



Ne réutilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas complètement sec.

Stockage

Si vous avez l'intention de laisser l'appareil inutilisé pendant longtemps, il est préférable de le ranger dans un endroit sec et propre et dans son emballage d'origine.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220-240V~ 50Hz
50W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 05 / 08 / 2016